
Ласкаво просимо



SCOTCH-литий ортез

- Нижні кінцівки
- Түлүб



münger
orthopädie

Für ein bewegtes Leben



01

Гомілка, гіпс для ходьби,
круговий

Гомілка, гіпс для ходьби, круговий

Показання

- До- /післяопераційний період після травм стопи та гомілковостопного суглоба.
- Рання функціональна терапія (розділена версія)
- Консервативне лікування травм стопи та верхнього гомілковостопного суглоба

Гомілка, гіпс для ходьби, круговий


Положення стопи

- Верхній гомілковостопний суглоб 90°
- Центральне положення Про-/Супінація

Гомілка, гіпс для ходьби, круговий

Пом'якшуюча вставка

- Медіальна та латеральна кісточки
- Край великогомілкової кістки
- Можливо, головка малоомілкової кістки

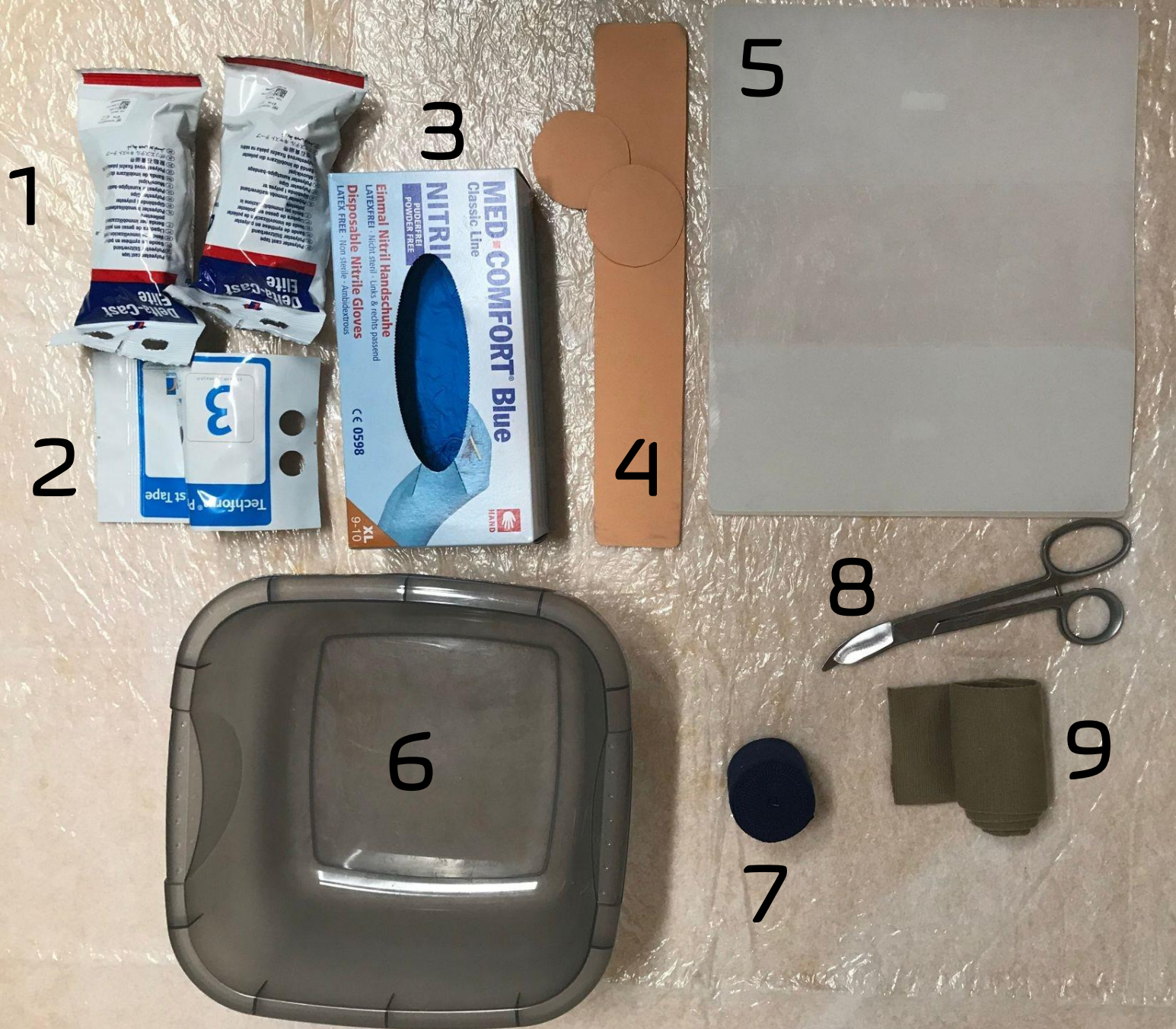

1. Бинти клейкі напівжорсткі
2. Бинти з поліетиленової плівки жорсткі
3. Рухавички
4. Прокладочний матеріал
5. П'яткова пластина
6. Відро з водою
7. Бинт
8. Гіпсові ножиці
9. Трикотажний шланг (скотч)





1. Трикотажна панчоха / прокладочний матеріал



2. Перше обмотування (напівжорстке), трикотажну



3. Жорстке фіксування та моделювання



4. Друге обмотування
(напівжорстко)



5. Позиція стопи 90°



6. Також можливо з пластиною
для передньої частини стопи



7. Готовий (фіксований) гіпс для ходьби

Опція: можливо і в розрізаному вигляді



8. Краї заклеїти скотчем



9. Перемотати



10. Розрізаний гіпс для ходьби



02

Шина стегнова,
дорсальна

Шина стегнова, дорсальна

Показання

- Післяопераційна іммобілізація після операцій на колінному суглобі
- Викривлення колінного суглоба
- Транспортна шина

Шина стегнова, дорсальна

Позиція

- Коліно: якщо дозволено навантаження 10-15°.
- Коліно: якщо на нього не можна навантажувати 30°.
- В іншому випадку за призначенням лікаря

Шина стегнова, дорсальна

Пом'якшуюча вставка

- Можл. Kondylen
- Головка малогомілкової кістки
- Вилка малогомілкової кістки



1. Бинти клейкі-Cast
→напівжорсткі
2. Бинти з клейкі
→Жорсткі
3. Рухавички
4. Прокладочний
матеріал
5. Відро з водою
6. Бинт
7. Ножниці для гіпсу /
Осцилятор
8. Трикотажна
панчоха
9. Клейка стрічка
10. Ріжучий інструмент



1. Трикотажна панчоха /
пом'якшуючий матеріал /
допомога для розрізання



2.

- Коліно виставити під бажаним кутом (наприклад, 30°)
- Верхній гомілковостопний суглоб 90°



3. Розрізання дорсальної частини шини



4. Фіксація тильної оболонки еластичним бинтом



5. Опціонально також доступний у вигляді панцира для гомілки зі стопою



6. Опціонально також доступний як дорсальна позиціонуюча оболонка без стопи



03

Фіксує чий корсет

Фіксуєчий корсет, круговий

Показання

- Післяопераційна іммобілізація
- Іммобілізація при підозрі на нестабільність
- Консервативне лікування переломів хребців
(тільки поперековий відділ хребта)

Фіксуєчий корсет, круговий

Позиція

- Випрямлення
- Фіксація / стабілізація

Фіксуєчий корсет, круговий


Оббивка

- Захист шкіри (трикотажний рукав або футболка)
- Передні, верхні шини



1. Бинти Scotch-Cast
→ Напівжорсткі
2. Бинти Scotch-Cast
→ Жорсткі
3. Рухавички
4. Ріжучий
інструмент
5. Відро з водою
6. Бинти
7. Ножичі для гіпсу
8. Футболка
9. Клейка стрічка



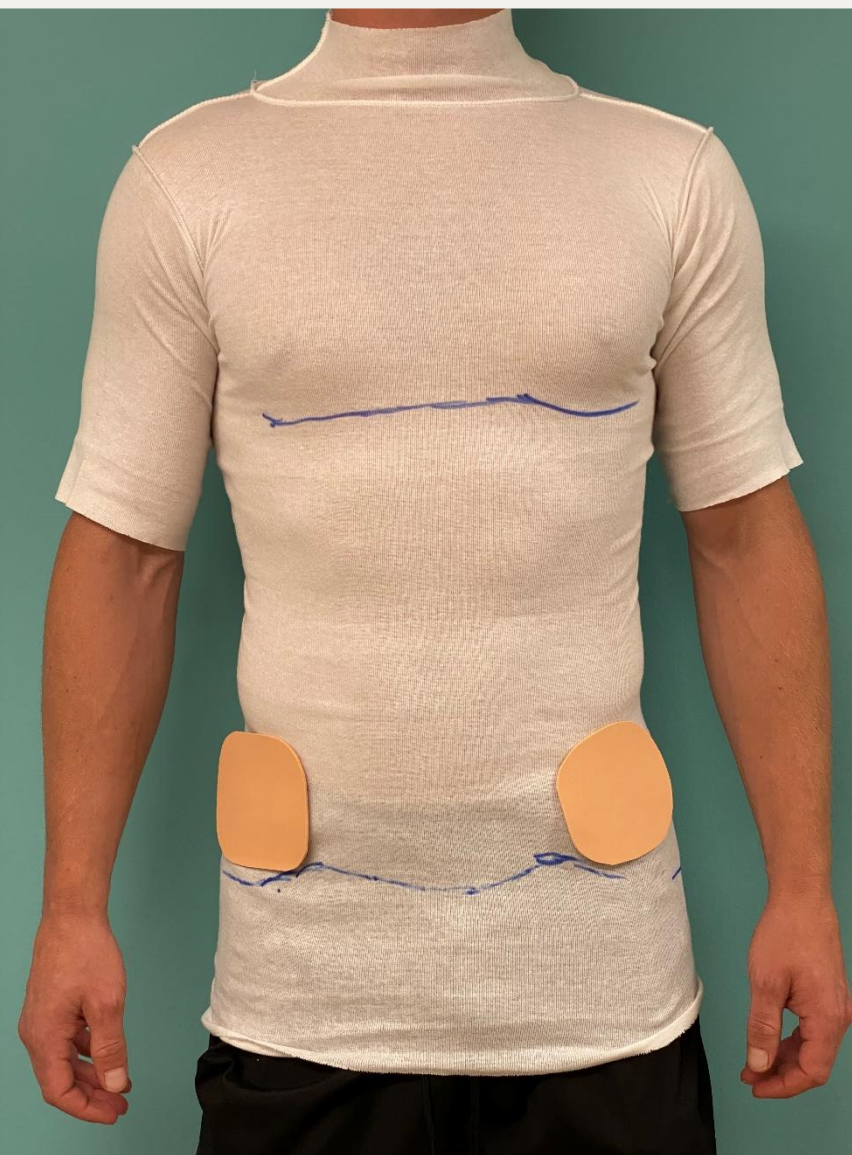

1. Захист тіла/Пом'якшення



2. Перше обмотування



3. Розміщення жорстко стегно



4. Розміщення жорстко спина



5. Друге обмотування з розміщенням допомоги для розрізання



6. Друге кругове обмотування



7. Позиціонування постави



8. Готовий корсет для фіксації, дорзально



9. Готовий корсет для фіксації, вентрально



10. Відкриття корсету для фіксації



11. Обклеїти краї



12. Зафіксувати корсет
перев'язочним матеріалом



13. Вигляд вентрально



14. Вид збоку в положенні сидячи



15. Вентральний вид в положенні сидячи

Завдяки взаємодії двох різних за твердістю накладок можна створити набагато більше, ніж показано в цій презентації:

Плече Сармієнто



Шина на передпліччя



Щиро дякуємо за Вашу увагу

Контакт за допомогою
via QR-кода:

